

Propiedades de la columna de adsorción de bilirrubina plasmática desechable BS330

Volumen de adsorbente (mL)	330
Biocompatibilidad	Probado según lo requerido en ISO10993
Material de adsorbente	Resina de intercambio aniónico de divinilbenceno de poliestireno
Material de carcasa	Polipropileno
Método de esterilización	Esterilización por Calor Húmedo
Paquete unitario	280mm(largo)×105mm(ancho)×108mm(alto)

*Contraindicaciones, Advertencias y Precauciones, consulte las Instrucciones de Uso.


JAFRON-Fabricante y Proveedor Mundial de Columnas de Adsorción



Sede de Jafron



CE

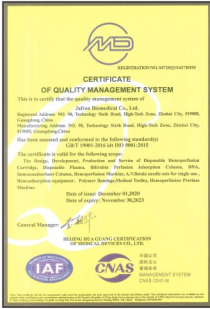

ISO 9001



EN ISO 13485

Referencias

[1] Han, Z., Yao, G. Application of Immunoabsorption therapy in autoimmune diseases. Journal of Internal Intensive Medicine. 2013; 19(3):141-142.

[2] Clinical Trial Report from The First Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine and Affiliated Hospital of Air Force Medical University.

[3] Xiang, D., Mao, Q., Wang, Y., Zhao, S., Zheng, S., et al. Therapeutic effects of selective plasma purifier on bilirubin adsorption. Infectious Diseases Information. 2010; 2(23), 93-100.

[4] Wen wangze, et al. Observation in vitro for the efficiency of resin hemoperfusion on severe hepatitis. Chinese Journal of Blood purification. 01(2003): 30-32.

[5] Bin huxiao, et al. Comparisons of effects of different types of physical artificial liver support system applied in treatment of patients with early stage of chronic severe hepatitis. Chin J TCM WM Crit Care, March. 202(2008):55-57.



JAFRON BIOMEDICAL CO., LTD.
Dirección: No. 98, Technology Sixth Road, High-tech Zone, Zhuhai City, 519085, Guangdong, China.
Tel: +86 (756) 3689708
Correo Electrónico: overseatrade@jafron.com
Página web: www.jafron.com

(Para uso interno)

Adsorción de Bilirrubina y Ácido Biliar




BS330

Columna de adsorción de perfusión de bilirrubina plasmática desechable

20 años en prácticas clínicas de purificación de sangre
Ampliamente utilizado en más de 80 países
Más de 5 millones de tratamientos por año



La resina de intercambio aniónico elimina la bilirrubina

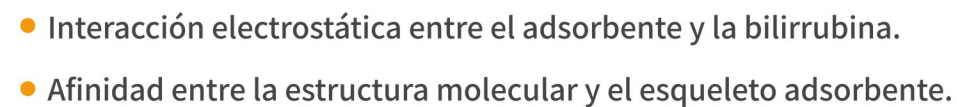

Aplicaciones de la terapia de adsorción[△]

Hiperbilirrubinemia


Hiperbiliacidemia

△Para obtener información detallada, accede a la página www.jafron.com por favor.

 Eliminar bilirrubina y ácido biliar


★ Datos clínicos de BS330^[1]

Duración de adsorción	Volumen de plasma circulante	La tasa de adsorción de la bilirrubina total
2	3600	59.68%
4	7200	67.16%
6	10800	71.06%

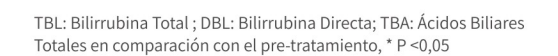

 Múltiples modos de operación de terapia y opciones flexibles

Diagrama de un sistema de extracción de plasma. El flujo comienza en un paciente (representado por una silueta humana), pasa por una **Bomba de sangre**, luego por un **Separador de plasma**. Desde el separador, el plasma es extraído y pasa por una **Bomba de plasma** y un filtro **BS330** antes de ser devuelto al paciente. El diagrama utiliza colores para distinguir los flujos: rojo para la sangre, azul para el plasma extraído y naranja para el plasma devuelto.

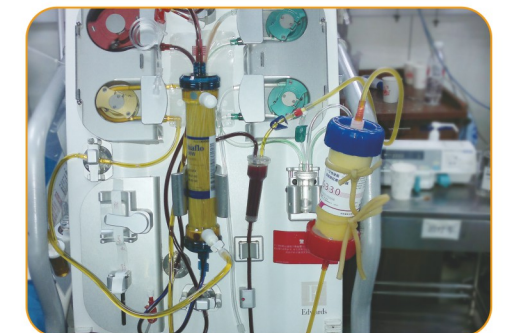

*En serie con HA330-II para eliminar toxinas hepáticas